


AFNAME VAN EEN URINESTAAL UIT EEN PEDIATRISCH URINEZAKJE

(of nierbekken)




1

Houd het zakje verticaal vast en dompel de transferpipet in de urine.

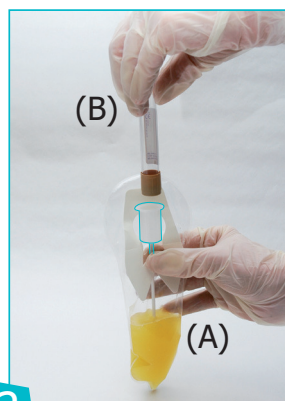

2

Houd de pipet met één hand vast (A). Steek de buis met de andere hand volledig in de houder van de transferpipet (B). Houd de tube vast tot de urinestroom stopt.

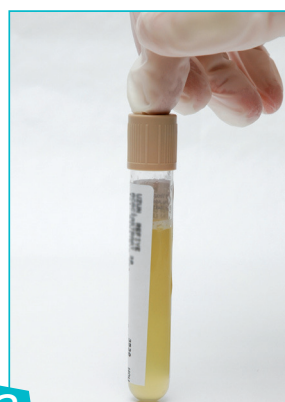

3

Kleef een etiket met de patiëntgegevens op de tube en bezorg de tube, samen met het aanvraagformulier, aan het laboratorium.

Houd de tijd tussen afname van de urine en de aankomst van de gevulde urinetube in het labo zo kort mogelijk.

Let op!

Werp de transferpipet in de kartonnen doos voor risicohoudend medisch afval.