

Laboratorium Klinische Biologie
Ziekenhuis Oost-Limburg
T: 089/32 46 70

AFNAME VOOR GEDROOGDE BLOEDSPOTS

1. Veneuze afname:

Neem een kleine EDTA of heparine buis af en stuur deze naar het labo.

In het labo wordt het bloedspotkaartje gevuld uitgaande van het volbloed:

- meng de volbloed buis
- pipetteer ongeveer 60µL bloed op de cirkels, de cirkels worden hierdoor volledig gevuld

2. Capillaire afname:

Het bloedspotkaartje kan ook gevuld worden d.m.v. een vingerprik.

- Ontsmet de huid en laat goed drogen.
- Prik met een lancetje zodat een grote druppel bloed verschijnt
- Breng 1 grote druppel bloed per cirkel op het filterpapier aan.




Het bloed moet zowel aan de voorkant als achterkant van het bloedspotkaartje zichtbaar zijn.

Incorrect:



Op de achterzijde ziet men dat het kaartje niet voldoende is gevuld. Dit kan vals-positieve resultaten geven

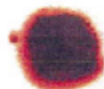

Onvoldoende gedroogde ontsmetting kan interfereren met de analyse.



Meerdere bloeddruuppels op elkaar aangebracht kunnen vals normale resultaten geven.

3. Drogen van het bloed:

- Laat het bloed drogen bij kamertemperatuur, gedurende minimum 4 uur. Vermijd warmte of zonlicht



4. Bewaring en versturing

- Zorg ervoor dat er een identificatie aanwezig is op het kaartje zelf.
- Bezorg het kaartje aan het laboratorium klinische biologie ZOL