


ACCU-CHEK SAFE T-PRO PLUS

Eenvoudig en veilig te gebruiken voor vingerprik

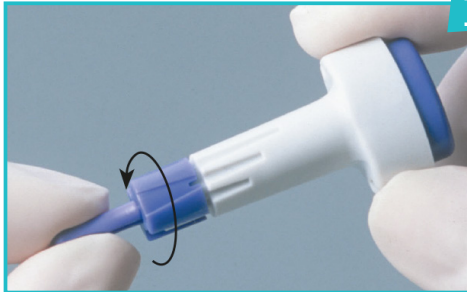


1

Verwijder het steriele beschermkapje met een draaibeweging.

Gebruik de prikker niet wanneer het steriele beschermkapje reeds is verwijderd. De steriliteit is dan niet meer gegarandeerd.

De prikker kan maar **1 maal** gebruikt worden

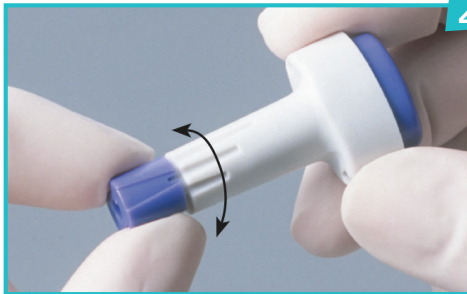


2

Stel de gewenste prikdiepte in door aan de paarse instelring te draaien.

De 3 prikdieptes zijn aangegeven door de inkepingen op de prikker zelf.

De diepte is vooraf ingesteld op medium

(Vóór het prikken: Maak de vingertop van de patiënt nat d.m.v. een met water doordrenkt niet-steriel kompres en droog de vinger goed af met een niet-steriel kompres)

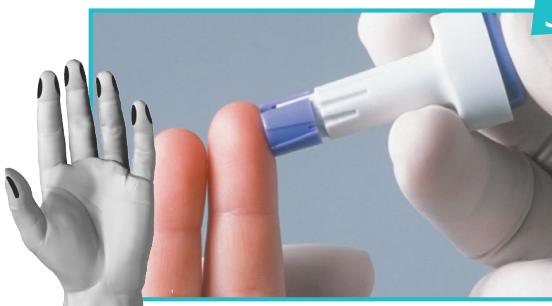

3

Duw de Accu-Chek safe T-Pro Plus prikker tegen de zijkant van de vingertop.

De zijkant van de vinger is minder pijnlijk.

Deze plek moet warm aanvoelen.

Wissel goed af van vingers voor het prikken van de glycemie.



4

Druk op de paarse knop bovenaan



5

Werp de prikker in het geel vaatje voor risicohoudend medisch afval.