

ZOL GENK

Campus Sint-Jan
Campus Sint-Barbara
Medisch Centrum André Dumont
ZOL MAAS EN KEMPEN



Prevena™-therapie

Voor de behandeling van uw chirurgische
incisie

ZOL GENK

Campus Sint-Jan
Synaps Park 1
B 3600 Genk

Campus Sint-Barbara

Bessemmerstraat 478
B 3620 Lanaken

Medisch Centrum André Dumont

Stalenstraat 2a
B 3600 Genk

ZOL MAAS EN KEMPEN

Diestersteenweg 425
B 3680 Maaseik

ZOL GENK
tel. +32(0)89 80 80 80
ZOL MAAS EN KEMPEN
tel. +32(0)89 50 50 50
info@zol.be

INLEIDING

Beste patiënt,

Deze brochure geeft u meer informatie over het gebruik en de werking van het prevena™ verband.

Mocht u na het lezen van deze brochure nog vragen hebben, aarzel dan niet om ze te stellen. Uw behandelend arts en/of de verpleegkundigen zijn steeds bereid om op al uw vragen te antwoorden.

INHOUDSTAFEL

1. Algemeen	3
2. Doel en werking	3
3. Voordelen	5
4. Algemene regels	5
5. Beknopte handleiding voor in de thuissetting	6
6. Contact	8

01 ALGEMEEN

Uw arts heeft gekozen voor het plaatsen van een Prevena™ verband op uw chirurgische wonde. Het biedt een oplossing voor het behandelen van gesloten chirurgische incisies bij patiënten met een hoog risico op complicaties.

Deze brochure geeft u nuttige informatie over de werking van dit systeem. Het is goed u te realiseren dat uw persoonlijke situatie anders kan zijn dan hieronder wordt beschreven.

Aarzel niet om uw arts/ verpleegkundige te contacteren indien u vragen heeft.

02 DOEL EN WERKING

Het Prevena™ verband heeft als doel het behandelen en beschermen van de chirurgische incisie en het verlagen van het risico op postoperatieve complicaties.

Het verband wordt meteen na de chirurgische ingreep geplaatst in het operatiekwartier. Het verband wordt via een 'verbindingsslang' aangesloten op een toestel die de negatieve druk uitoefent op het verband.

Het is een draagbaar systeem, voor eenmalig gebruik. Het verband dient 7 dagen ter plaatse te blijven.

Indien u minder dan 7 dagen in het ziekenhuis verblijft zal u een prevena™ verband krijgen met een wegwerpbaar toestel (Peel and place kit). Dit toestel kan niet worden opgeladen en wordt geleverd met drie AA-batterijen. Het wordt aanbevolen dat u extra batterijen bij de hand hebt indien de batterijen vroegtijdig leeg zijn, in principe gaan deze 7 dagen mee. Raadpleeg de handleiding voor patiënten van de 3M™ Prevena™ (zie achteraan brochure).

Indien u minimaal 7 dagen in het ziekenhuis verblijft zal u een prevena™ verband krijgen, verbonden met een toestel uit het ziekenhuis. Dit toestel kan worden opgeladen via de acculader (kan maximaal 8u zonder stroom). Het toestel dient gedragen te worden d.m.v. het draagtasje.

Beide toestellen zijn draagbaar, zodat dit geen belemmering geeft in het mobiliseren na de ingreep. Het toestel kan worden gedragen d.m.v. een draagtas met verstelbare banden die u op verschillende manieren kan dragen.



Prevena™ verband met verbindingsslag



Toestel van het ziekenhuis



Wegwerptoestel bij ontslag

03 VOORDELEN

- Vermindert oedeem (= zwelling ter hoogte van de wonde)
- Houdt de randen van de chirurgische wonde bij elkaar
- Vormt een barrière voor besmetting van buitenaf
- Vermindert de spanning op de wonde
- Voert vocht en infectieus materiaal af
- Zorgt voor een continue druk van -125mmHg gedurende 7 dagen
- Bevordert de genezing

04 ALGEMENE REGELS

- Bewaar uw toestel op een veilige plaats. Zorg ervoor dat de slang niet geknikt of afgeklemd kan geraken en het toestel niet van een tafel kan worden getrokken of op de vloer kan vallen.
 - Bij toestemming van uw arts mag u een snelle douche nemen. Houd het toestel uit de buurt van directe waterstralen. Dompel het wondverband niet onder water (neem absoluut geen bad!).
 - Verwijder het wondverband niet of kijk niet onder het wondverband terwijl de therapie wordt toegepast.
 - Controleer dagelijks de vacuüm van het wondverband (spons moet 'hard' aanvoelen, instellingen op het toestel bekijken kan eventueel door een thuisverpleegkundige).
- Tijdens de ziekenhuis opname zal uw verpleegkundige het verband verwijderen na 7 dagen.
 - Indien u thuis bent met deze therapie zal het toestel na 7 dagen een alarm geven en zal het zichzelf automatisch uitschakelen. Op dag 7 zal u een afspraak krijgen op de raadpleging bij uw behandelende arts. Op dit moment zal uw prevena™ verband worden verwijderd.
 - Indien u ziet dat de huid rondom het verband rood wordt, de wonde begint te ruiken, u pijn krijgt aan de wonde, u koorts krijgt, er bloedverlies optreedt ... Neem dan meteen contact op met uw behandelende arts.

05 BEKNOPTE HANDLEIDING VOOR IN DE THUISSETING

BEKNOPTE HANDLEIDING

PREVENA™ INCISION MANAGEMENT SYSTEM

Indicatoren en waarschuwingen van de PREVENA™ 125 unit



Indicator
Let op



Geluidssignaal
(gedempt)



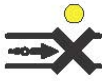
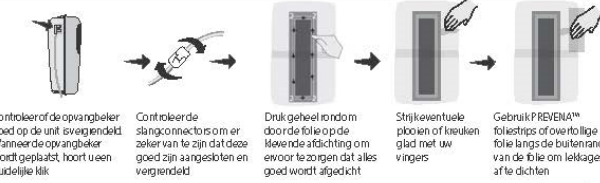
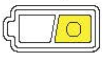
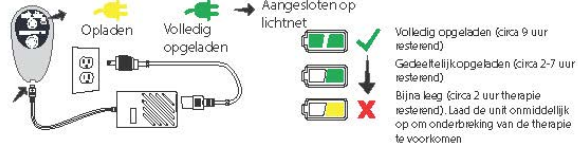
Batterijniveau

Dit is een beknopte handleiding. Meer informatie vindt u in de handleiding voor zorgverleners bij het PREVENA™ systeem

Type waarschuwing	Hoe te verhelpen
Waarschuwing Lekkage Een pieptoon en een continu brandend geel lampje 	Om te waarborgen dat het PREVENA™ incisie-wondverband op de juiste wijze wordt aangebracht, beschikt de PREVENA™ 125 unit over de VISICHECK™ optie. Druk tweemaal op de aan-/uitknop. - Een lampje: Optimaal - Twee lampjes: Goed - Drie lampjes: Marginaal Volg deze stappen als de VISICHECK™ optie een 'marginale' leksnelheid aangeeft: - Controleer of de opvangbeker in de unit is vergrendeld - Controleer de slangconnectors om er zeker van te zijn dat deze goed zijn aangesloten en vergrendeld - Stryk eventuele plooiën in de folie glad met uw vingers - Gebruik PREVENA™ foliestrips (in de verpakking van het wondverband) om lekkages af te dichtten - Druk de randen van het wondverband langzaam en stevig aan
Waarschuwing Opvangbeker vol Twee pieptonen en een continu brandend geel lampje 	Controleer het vloeistofniveau in de opvangbeker. 1. En volgt u de stappen in de gebruikershandleiding hoe een opvangbeker te vervangen 2. Als de opvangbeker vol is, schakelt u de unit uit 3. Neem contact op met uw 3M+KCI-vertegenwoordiger
Waarschuwing Batterij bijna leeg Bijna leeg - Een lange pieptoon en een continu brandend geel lampje Leeg - Een snel herhaalde pieptoon die in volume toeneemt en twee continu brandende gele lampjes 	Deze unit wordt geleverd met drie AA-batterijen. 1. Houd vijf seconden ingedrukt om uit te schakelen 2. Druk tegen het klepje aan de achterkant van de unit om het te openen 3. Plaats drie AA-batterijen (lithiumbatterijen aanbevelen) 4. Druk om het klepje te sluiten 5. Houd twee seconden ingedrukt om in te schakelen
Waarschuwing Systeemfout Een snel herhaalde pieptoon die in volume toeneemt en twee continu brandende gele lampjes 	Reset de unit: 1. Houd vijf seconden ingedrukt om uit te schakelen 2. Houd twee seconden ingedrukt om weer in te schakelen 3. Neem contact op met uw 3M+KCI-vertegenwoordiger als de therapie nog steeds niet opstart
Levensduur van apparaat verstreken Drie lampjes geven aan dat de levenscyclus is verstreken. Er klinkt 15 seconden lang een herhaalde pieptoon waarna het apparaat wordt uitgeschakeld 	Neem contact op met uw 3M+KCI-vertegenwoordiger Levenscyclus = 192 uur (acht dagen)

3M + KCI™

Indicatoren en waarschuwingen van de PREVENA PLUS™ 125 unit

Type waarschuwing	Hoe te verhelpen
Waarschuwing Blokkering  Er klinken om de 15 seconden twee pieptonen als hoorbare blokkeringswaarschuwing	 Controleer of de opvangbeker vol is Controleer de slang op knikken Zorg dat de klem van de slang geopend is
Waarschuwing Leckage  Er klinken om de 15 seconden twee pieptonen als hoorbare lekkagewaarschuwing	 Controleer of de opvangbeker goed op de unit is vastgemaakt. Wanneer de opvangbeker wordt geplaatst, hoort u een duidelijke klik. Controleer de slangconnector om er zeker van te zijn dat deze goed zijn aangesloten en vergrendeld. Druk geheel rondom door de folie op de lijdende afzichting om ervoor te zorgen dat alles goed wordt afgedicht. Strijk eventuele plooiën of kreukels glad met uw vingers. Gebruik PREVENA™ foliestrips of overtoellige folie langs de buitenrand van de folie om lekkages af te dichten.
Waarschuwing Batterij bijna leeg  Er klinken twee pieptonen om de vier minuten	 Opladen Volledig opgeladen Aangesloten op lichtnet Volledig opgeladen (circa 9 uur resterend) Gedeeltelijk opgeladen (circa 2-7 uur resterend) Bijna leeg (circa 2 uur therapie resterend). Laad de unit onmiddellijk op om onderbreking van de therapie te voorkomen.
Waarschuwing Systeemfout  Alle LED's knipperen en twee pieptonen worden om de 15 seconden herhaald	Schakel de unit uit en vervolgens weer in  uit → aan → Therapie voortzetten X → Neem contact op met uw 3M+KCI-vertegenwoordiger
Knop Waarschuwing dempen 	- Houd het midden van de knop 'Waarschuwingen dempen' drie seconden ingedrukt tijdens een waarschuwingsconditie om de waarschuwingstoon twee minuten te dempen. - Wanneer de knop 'Waarschuwingen dempen' is ingedrukt, licht deze op om aan te geven dat dempen is geactiveerd. - De waarschuwing klinkt na twee minuten opnieuw tenzij de reden voor de waarschuwing is opgeheven.
Therapie beëindigd 	- Er wordt een continu brandend geel lampje ingeschakeld boven de indicator voor de resterende therapieduur. - Er klinken acht pieptonen gevolgd door een continue pieptoon van vijf seconden en de unit wordt uitgeschakeld. - Wanneer de cyclus van de unit is voltooid en er een poging wordt gedaan om de unit in te schakelen, klinkt een waarschuwingstoon van drie seconden en wordt de unit uitgeschakeld. - Informeer de behandelend arts of zorgverlener na voltooiing van de therapie.

OPMERKING: Voor deze producten en therapieën gelden specifieke indicaties, contra-indicaties, waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en veiligheidsinformatie. Raadpleeg een arts en neem de gebruiksaanwijzing door voorafgaand aan het gebruik. Dit materiaal is bedoeld voor zorgprofessionals.

©Copyright 2020 3M. Alle rechten voorbehouden. 3M en de andere weergegeven merken zijn merken of geregistreerde merken. Ongeoorloofd gebruik verboden. PRA-PM-NL-00057 (06/20)

3M + KCI

06 CONTACT

Wondzorgteam ZOL

Steeds bereikbaar van maandag- vrijdag van 8u tot 16u30

Tel. 089/ 80 73 12

wondzorg@zol.be

Ziekenhuis- Oost Limburg, Synapspark 1

3600 Genk

24u/24u wachtdienst vanuit de firma GDMedical

Tel. 02/ 808 58 80

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties, laat het ons weten.

Wij zijn er om u te help

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



www.ZOL.be



www.twitter.com/ZOLziekenhuis



www.facebook.com/ZOLzh



www.youtube.com/user/ZOLziekenhuis

Schrijf u in op onze nieuwsbrief via www.zol.be

Raadpleeg online uw medisch dossier via www.mijnzol.be