




AFNEMEN VAN SCREENINGSTALEN

UITVOERING

1. SCREENING MRSA: keel-neus-perineum afname



ML0108

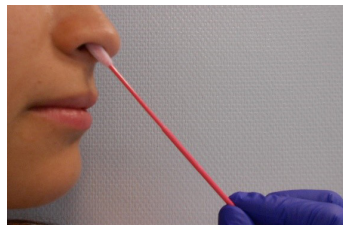

1 Neem de 1^{ste} roze wisser en wrijf met een rollende beweging over het neusslijmvlies in het voorste deel van beide neusgaten (neus NIET eerst snuiten).




2 Dompel de wisser in de vloeistof van de buis. Draai de wisser vervolgens 5 keer rond en druk de wisser uit tegen de binnenkant van de buis. Verwijder de wisser.



3 Neem de 2^{de} roze wisser en wrijf over het keelslijmvlies ter hoogte van de amandelen (links en rechts van de huig).



4 Dompel de wisser in de vloeistof van de buis. Draai de wisser vervolgens 5 keer rond en druk de wisser uit tegen de binnenkant van de buis. Verwijder de wisser.

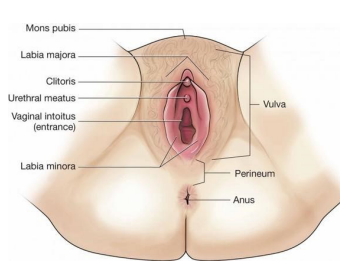

5 Neem de witte wisser en wrijf goed over de huid van het gebied tussen de anus en de geslachtsdelen (perineum).




6 Steek de wisser in het buisje en breek de wisser af aan het breekpunt. Sluit de buis met de witte wisser erin. Noteer op de buis de lokalisatie van de staalafname (KNP= keel-neus-perineum) en breng een éénduidige patiëntidentificatie aan.


2. SCREENING VRE, CPE en ESBL: rectale afname



ML0103

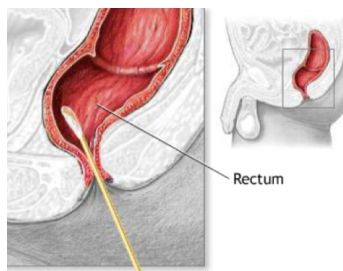

1 Neem de wisser en breng de wisser via de anus door de rectale sfincter (ongeveer 1 à 2 cm diep) en bestrijk de wanden van het rectaal kanaal.

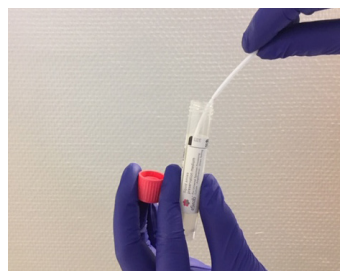

2 Steek de wisser in het buisje en breek de wisser af aan het breekpunt. Sluit de buis met de witte wisser erin. Noteer op de buis de lokalisatie van de staalafname (rectaal) en breng een éénduidige patiëntidentificatie aan.

TRANSPORT

Verstuur de buisjes zo snel mogelijk met de buizenpost naar het labo, liefst binnen de 2 uur. Stalen ouder dan 24u worden niet uitgevoerd gezien de kwaliteit van het resultaat niet meer kan gegarandeerd worden.